

Bruksanvisning

REF	CamLoc Rail Clamp	800-0271
REF	CamLoc Rail Clamp, Stor	800-0271-L
REF	CamLoc Rail Clamp (DEN)	800-0271-DEN
REF	CamLoc Rail Clamp (EU)	800-0271-EU
REF	CamLoc Rail Clamp (JPN)	800-0271-JPN
REF	CamLoc Rail Clamp (UK)	800-0271-UK
REF	CamLoc Rail Clamp (SWISS)	800-0271-SWISS



TILTENKT BRUK

Tiltent bruk for CamLoc Clamp er å holde tilbehør til kirurgiske bord. De tiltenkte brukerne av denne enheten er medisinske fagpersoner på sykehus og kirurgisentre.

GENERELL INFORMASJON


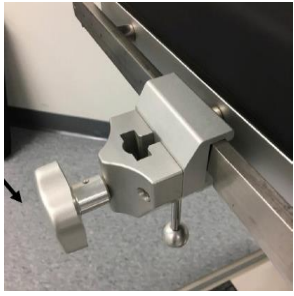



- *Velg standard klemmer (800-0271) for bruk ved 1-2 sterile draperinger eller store klemmer (800-0271-L) for bruk ved 3-5 sterile draperinger*
- *Produktet er ikke laget av naturgummilateks*
- *Enheten støtter 227 kg (227 kg) proporsjonal pasientbelastning (6'4" (193 cm) høy pasient per 99 % kroppsmodell)*
- *Produktgarantien dekker produktet mot produksjonsfeil i en periode på 2 år.*
- *Hvis det har blitt skadet under forsendelse, kan du ringe kundetjenesten på (888) 724-8763 eller (781) 982-7000 for å få et returnnummer. Kontakt kundetjenesten hvis du har spørsmål om produktgarantien.*
- *CE-merket medisinsk enhet i henhold til MDR (EU) 2017/745*
- *Produktet er vedlikeholdsfritt, kontroller tilstanden til produktet før neste gangs bruk*
- *Enheten har en levetid på 5 år ved normal bruk.*
- *Oppbevar enheten mellom -4°F to +86°F (-20°C til 30°C)*

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Enhetens mål (maksimum)

- *Lengde: 4.75" +/- 0.5" (12 cm +/- 1 cm)*
- *Bredde: 5" +/- 0.5" (13 cm +/- 1 cm)*
- *Dybde: 2.25" +/- 0.5" (6 cm +/- 1 cm)*
- *Enhetens vekt: 2 +/- 0.5 lbs. (.9 kg +/- .22 kg)*
- *Festes til skinnen hvor som helst på et kirurgiske bord*
- *Installeres av én person*

INSTRUKSJONER

	<p>Steg 1. <i>Festklemmen til sideskinnen (som vist).</i></p> <p>CamLoc låses til skinnen fra bunnen Klemmen kan ikke festes der det er et hakk i sideskinnen - den blir ikke sikret eller låst.</p>	
	<p>Steg 2. <i>Lås klemmen ved å vri en rustfri stålkule med klokken eller mot klokken (som vist).</i></p>	
	<p>Steg 3. <i>Sett i tilbehøret (som vist).</i></p>	
	<p>Steg 4. <i>Lås tilbehøret ved å vri den stjerneformede knotten (som vist).</i></p>	

OVERSIKT OVER KOMPONENTER

CamLoc er en klemme for kirugiske bord som kan festes til sideskinnene på ethvert bord.

Se sideskinnens dimensjoner under:

USA: 0.374" x 1.122" (9.5 mm x 28.5 mm) PN# 800-0271

Denyer: 0.236" x 1.496" (6 mm x 38 mm) PN# 800-0271-DEN

Europa: 0.394" x 0.984" (10 mm x 25 mm) PN# 800-0271-EU

Eschmann (Storbritannia): 0.236" x 1.260" (6 mm x 32 mm) PN# 800-0271-UK

Japan: 0.354" x 1.260" (9 mm x 32 mm) PN# 800-0271-JPN

Sveits: 0.394" x 1.181" (10 mm x 30 mm) PN# 800-0271-SWISS

AVHENDING

- **Generelt** - Unngå infeksjon ved å vaske og desinfisere produktet før avhending
- **Forpakning** - Kast innpakningsmaterialet i husholdningsavfallet i henhold til nasjonale retningslinjer
- SchureMed tar i mot brukte og gamle produkter - eller kaster produktet i henhold til nasjonale retningslinjer



ADVARSLER KNYTTET TIL BRUK AV PRODUKTET

ADVARSEL!

Maksimal belastning plassert på produktet på ikke overskride den aktuelle proporsjonen til en pasient som veier 227 kg. (227 kg). Bruk med forsiktighet ved lav-maksimal vekt slik at ikke operasjonsbordets skinner blir overbelastet. Følg nøye instruksjonene for bruk sammen med ditt operasjonsbord system.



ADVARSEL! Enheten må ikke gjenbrukes hvis det er klare tegn på skade eller funksjonsproblemer. Snakk med produsent før gjenbruk.

RENGJØRINGS INSTRUKSJONER

Rengjør CamLoc grundig før bruk og steriliser etter hver bruk

- **Anbefalte rengjøringsprodukter:** (Alle vaskemidler bør brukes i henhold til produsentens instruksjoner)
 - Enzymatisk pH-nøytral vaskemiddelopløsning
 - (Enzymatiske vaskemiddel som er kompatible med metalinnretninger/instrumenter er å foretrekke)
 - Ikke-enzym hydrogenperoksidbasert løsning
 - Coverage Plus NPD One Step Cleaner, Disinfectant & Deodorizer Concentrate

RENGJØRING FOR HÅND

- Skrubber hver del med en myk, plastbørste og en anbefalt vaskemiddelopløsning (se ovenfor)
- Skyll alle delene nøye og fjern alle kjemiske rester
- Tørk hver del helt tørr med en ren, lofri klut

RENGJØRING I MASKIN

- Kjør gjennom vaskemaskin/dekontaminator etter produsentens anbefalinger (Velg program som ikke inneholder smøring)
- Klargjør for sterilisering (enheten må være ren før sterilisering)
- See steriliseringsinstruksjoner nedenfor

*Based on information provided by the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC), the Center for Disease Control (CDC), the National Center for Biotechnology Information (NCBI) and the U.S. National Library of Medicine.

VANNDAMPSTERILISERING

Bruk den steriliseringsemballasje og innpakningsmetode som godkjent for ditt anlegg.

Pre-Vakuum

Innpakkede instrumenter

Anbefalt tid ved 132°C (270°F): 4 minutter

Tørketid: 40 minutter

BRUKERVARSEL

Enhver alvorlig hendelse som har skjedd i forbindelse med enheten, skal rapporteres til produsenten og vedkommende myndighet i medlemsstaten der brukeren og / eller pasienten er etablert.

UDI Grunnleggende UDI-DI: 081005737F0018KY

eIFU språkversjoner

For å laste ned og skrive ut bruksanvisningen, gå til <http://www.schuremed.com/schuremed-eifu>.

Symbolliste

Symbol	Tittel	Symbolbeskrivelse
	Produsent	Indikerer produsenten av den medisinske enheten
	Autorisert representant i EU	Indikerer autorisert representant i EU.
	Utløpsdato	Indikerer best før-dato, etter denne skal ikke den medisinske enheten brukes.
	Produksjonsnummer	Indikerer produsentens produksjonsnummer for identifisering av parti eller serie.
	Katalog- eller artikkelnummer	Indikerer produsentens katalog- eller artikkelnummer, slik at den medisinske enheten kan identifiseres.
	Serienummer	Indikerer produsentens serienummer for identifisering av en spesifikk medisinsk enhet.
	Forsiktig	For å indikere at forsiktighet er nødvendig ved bruk av enheten eller kontrollen i nærheten av hvor symbolet er plassert, eller for å indikere at den gjeldende situasjonen krever operatørens forståelse eller handling for å unngå uønskede konsekvenser.
	Medisinsk enhet	Indikerer at artikkelen er en medisinsk enhet.
	Unik enhetsidentifikator	Indikerer en strekkode som inneholder unik informasjon av enhetsidentifikator.
	CE-merking	Europeisk samsvar.
	Kun for bruk på en pasient	Indikerer at artikkelen er en medisinsk enhet kun for bruk på en pasient.



Produsent

SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Gratisnummer (888) 724-8763 | **Tlf** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | **orders@schuremed.com**



Autorisert representant

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP Haag, Nederland