

Bedienungsanleitung

REF Disposable Face Masks 800-0164


VERWENDUNGSZWECK

Der Verwendungszweck ist die Fixierung des Patientenkopfs während der Operation. Das Gerät ist für medizinisches Fachpersonal in Krankenhäusern und Operationszentren bestimmt.

ANLEITUNG

Machen Sie sich vor der Verwendung am Patienten mit den Funktionen des Patientenpositionierungsgeräts vertraut. Üben Sie vor der klinischen Verwendung stets an einer Pflegekraft, einem Arzt oder einem anderen geeigneten Freiwilligen.

1. Positionieren Sie den Patienten in Rückenlage auf dem Operationstisch/Schulterstuhl
2. Nachdem der Patient intubiert wurde, halten Sie Kopf/Hals des Patienten und heben Sie den Schulterstuhl an, sodass sich der Patient in Fowler-Position (sitzend) befindet
3. Lösen Sie das Kugelgelenk, und justieren Sie den Kopfpositionierer um den Kopf des Patienten. Stellen Sie sicher, dass die Ohren des Patienten unbedeckt sind. Ziehen Sie dann das Kugelgelenk an.
4. Halten Sie die Seitenteile des Kopfpositionierers an den Patientenkopf, und platzieren Sie die Gesichtsmaske wie dargestellt; stellen Sie dabei sicher, dass Augen, Nase und Mund unbedeckt sind
5. Schließen Sie auf der einen Seite des Kopfpositionierers den Klettverschluss oben und unten an der Maske. Schließen Sie dann wie dargestellt die andere Seite; stellen Sie dabei sicher, dass die Gesichtsmaske mittig auf dem Gesicht sitzt.

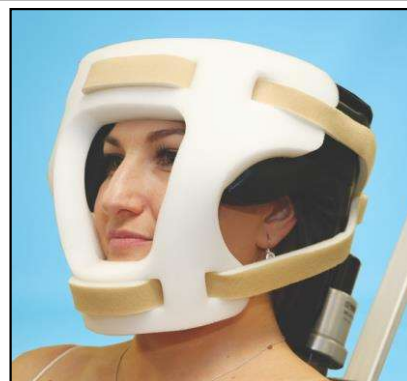

HINWEIS: Der Kopf sollte sicher positioniert sein. Andernfalls die Riemen etwas enger anziehen.

ALLGEMEINE ANGABEN

Abmessungen des Geräts (Maximum)

- Länge: **Riemen:** 29 Zoll +/- 0,5 Zoll (74 cm +/- 1 cm), **Gesichtsmaske:** 9 Zoll +/- 0,5 Zoll (23 cm +/- 1 cm)
- Breite: 13,5 Zoll +/- 0,5 Zoll (34 cm +/- 1 cm)
- Tiefe: 1 Zoll +/- 0,5 Zoll (2,5 cm +/- 1 cm)
- Gerätegewicht: 0,25 +/- 0,5 lbs. (0,11 +/- 0,22 kg)
- Wird am Kopfabschnitt von SchureMed-Schulterstühlen befestigt
- Installation durch eine Person.

ÜBERBLICK ÜBER DIE KOMPONENTEN

Einweg-Gesichtsmaske fixiert den Patientenkopf während der Operation. Riemen sind weich und biegsam und lassen sich an den Kopfrahmen anpassen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- *Produkt besteht nicht aus Naturkautschuklatex*
- *Rufen Sie bei Transportschäden den Kundendienst unter (888) 724-8763 oder (781) 982-7000 an, um eine Warenrücksendenummer zu erhalten. Wenden Sie sich für Angelegenheiten hinsichtlich der Produktgarantie an den Kundendienst*
- *CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt gemäß MDR (EU) 2017/745*
- *Lagern Sie das Gerät zwischen -4° F und +86 °F (-20 °C bis 30° C).*



VERWENDUNG AN EINEM PATIENTEN – Bitte nach jeder Verwendung entsorgen

HINWEIS FÜR DEN BENUTZER

Melden Sie größere Zwischenfälle im Umgang mit dem Gerät beim Hersteller und bei der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Benutzer und/oder der Patient niedergelassen ist.

UDI Basis-UDI-DI: 081001460F0011DM

eIFU Sprachversionen

Um die Gebrauchsanweisung herunterzuladen und auszudrucken, gehen Sie auf <http://www.schuremed.com/schuremed-eifu>.

Symbolglossar

Symbol	Titel	Symbolbeschreibung
	Hersteller	Gibt den Hersteller des Medizinprodukts an.
	Autorisierter Beauftragter in der Europäischen Gemeinschaft	Gibt den autorisierten Beauftragten in der Europäischen Gemeinschaft an.
	Verfallsdatum	Gibt das Datum an, nach dem das Medizinprodukt nicht mehr verwendet werden darf.
	Chargencode	Gibt den Chargencode des Herstellers an, damit die Charge oder das Los identifiziert werden kann.
	Katalog- oder Artikelnummer	Gibt die Katalog- oder Artikelnummer des Herstellers an, damit das Medizinprodukt identifiziert werden kann.
	Seriennummer	Gibt die Seriennummer des Herstellers an, damit ein bestimmtes Medizinprodukt identifiziert werden kann.
	Vorsicht	Zeigt an, dass bei der Bedienung des Geräts oder der Steuerung in der Nähe des Symbols Vorsicht geboten ist, oder dass die aktuelle Situation die Aufmerksamkeit des Bedieners oder das Eingreifen des Bedieners erfordert, um unerwünschte Folgen zu vermeiden.
	Medizinisches Gerät	Zeigt an, dass es sich bei dem Artikel um ein Medizinprodukt handelt.
	Unique Device Identifier	Zeigt an, dass ein Barcode Informationen zur einmaligen Produkterkennung enthält.
	CE-Kennzeichnung	Europäische Konformität.
	Zum einmaligen Gebrauch durch einen Patienten	Zeigt an, dass es sich bei dem Artikel um ein Medizinprodukt zum einmaligen Gebrauch durch einen Patienten handelt.



Hersteller

SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Gebührenfrei (888) 724-8763 | **Tel** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | **orders@schuremed.com**



Autorisierter Beauftragter

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, Niederlande