

Kullanım Talimatları

REF Nissen Straps 800-0055

KULLANIM AMACI

Kullanım amacı, hastaları ters Trendelenburg pozisyonuna getiren güvenli bir sistem sağlamaktır. Bu cihazın hedef kullanıcıları, hastanelerde ve ameliyat merkezlerinde çalışan tıp uzmanlarıdır.



TALİMATLAR

Bir hasta üzerinde kullanmadan önce hasta konumlandırma cihazının özellikleri hakkında bilgi sahibi olun. Klinik ortamda kullanmadan önce bir hemşire, doktor veya uygun bir gönüllü üzerinde deneme yapın.

Aksesuar ve Kurulum



1. Simple Clamps (ayrı satılır) aksesuarını masanın yan raylarına yerleştirin. Montaj direklerini kelepçelere takın ve güvenli bir şekilde kilitleyin
2. Nissen Straps aksesuarını, pedler iç kısma bakacak şekilde hastanın kollarının etrafına sarın
3. Kelepçeleri, montaj klipslerine yerleştirmek için toka kenarlarına takın. Tokaları kaldırarak ve kayışları çekerek ayarlayın.

Sökme Talimatları

1. Tokaları kaldırarak kayışları gevşetin ve ardından klipsleri çıkarın
2. Kelepçeleri gevşetin ve kelepçenin dışına doğru kaldırarak Nissen Straps aksesuarını çıkarın
3. Kelepçeleri yan raylardan sökün

GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Cihaz Boyutları (maksimum)

- *Uzunluk: 48" +/- 0,5" (122 cm +/- 1 cm)*
- *Geniřlik: 6" +/- 0,5" (15 cm +/- 1 cm)*
- *Derinlik: 2" +/- 0,5" (5 cm +/- 1 cm)*
- *Cihaz Ađırlığı: 3,5 +/- 0,5 lbs. (1,5 +/- 0,22 kg)*

BİLEŐENE GENEL BAKIŐ

Nissen Straps aksesuarı bir kelepçe ile ameliyat masasının yanlarına takılan bir ameliyat masası aksesuarıdır.

Kullanım ii diđer gerekli rnler:

(2) 800-0228 Simple Clamp (ayrı satılır)

ABD: 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0228

Denyer: 0,236" x 1,496" (6 mm x 38 mm) PN# 800-0228-DEN

Avrupa: 0,394" x 0,984" (10 mm x 25 mm) PN# 800-0228-EU

Eschmann (BK): 0,236" x 1,260" (6 mm x 32 mm) PN# 800-0228-UK

Japon: 0,354" x 1,260" (9 mm x 32 mm) PN# 800-0228-JPN

İsvire: 0,394" x 1,181" (10 mm x 30 mm) PN# 800-0228-SWISS

GENEL BİLGİLER

- *rn, Dođal Kauuk Lateksten retilmemiŐtir*
- *Cihaz 600 lbs. (272 kg) orantılı hasta ykn (her %99 insan vcudu modeli baŐına 6'4" (193 cm) uzun boylu hasta) destekler*
- *rn garantisi, 2 yıl sreyle retim hataları ieren rn kapsar*
- *Nakliye sırasında hasar grmŐse (888) 724-8763 veya (781) 982-7000 numaralı telefonlardan MŐterisi Hizmetlerini arayarak Malzeme İade Yetkisi numarası alın. rn garanti sorunları iin MŐterisi Hizmetlerini arayın.*
- *MDR (EU) 2017/745 uyarınca CE iŐaretli tıbbi cihaz*
- *rn bakım gerektirmez, bir sonraki kullanımdan nce rnn durumunu kontrol edin*
- *Cihazın mr normal kullanımda 5 yıldır*
- *Cihazı -4 F ila +86 F (-20 C ila 30 C) arasında saklayın*
- *Hastane sınıfı dezenfektan ile temizleyin*
- *Pedler Cal #117 ile uyumludur*

İMHA ETME

- **Genel** - rn imha etmeden nce temizleyerek ve dezenfekte ederek enfeksiyonu nleyin
- **Paketleme** - Paketleme malzemesini, ulusal mevzuatlara gre evsel atık olarak imha edin
- **SchureMed**, kullanılmıŐ veya kullanımdan kaldırılmıŐ rnleri kabul eder ya da ulusal mevzuata gre rnleri imha eder



RN KULLANIM UYARILARI

UYARI! Maksimum yk, 600 lbs. (272 kg) ađırlığındaki bir hastanın uygun oranını gememelidir.

Aksesuar raylarının aŐırı yklemeyin ve dŐk maksimum yk kapasiteli ameliyat masalarında dikkatli bir Őekilde kullanın.

**UYARI!**

Yanlış kullanımdan dolayı tehlike oluşturur. Ameliyat masası sisteminizin Kullanım Talimatlarını harfiyen takip edin.

**UYARI!**

Aşınmış, hasarlı veya parçaları eksikse ekipmanı kullanmayın.



UYARI! *Bariz hasar ibareleri veya işlevsel sorunlar varsa cihazı tekrar kullanmayın. Yeniden kullanmadan önce üreticiye danışın.*

TEMİZLİK TAVSİYELERİ

Doğru temizlik ve dezenfeksiyon prosedürleri için güncel Perioperatif Kayıtlı Hemşireler Derneği Dergisi Talimatlarını takip edin.

**UYARI!**

Ş Güvenliği ve Sağlık İdaresinin kan yoluyla bulaşan hastalıklar standartlarına bağlı kalın. Cihazı temizlemek için önerilen koruyucu kıyafet, eldiven, maske ve göz koruması kullanın.

DİKKAT

Temizlik sıvıları ile ilgili üreticinin talimatlarını harfiyen okuyun/takip edin. Fenolik içeren temizlik maddeleri KULLANMAYIN.

- 1. Tek kullanımlık malzemeler ile cihazdaki büyük kirleri giderin. Uygun biyolojik tehlike içeren atık imha etme prosedürlerini takip edin.*
- 2. Tüm aksesuar üzerinde bolca temizlik sıvısı kullanın, ardından nem ve temizlik sıvısı tamamen çıkana kadar tıy bırakmayan temiz bir bezle silin*
- 3. Aksesuarı kurumaya bırakın*

KULLANICI UYARISI


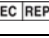


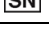






Cihazla ilgili meydana gelen herhangi bir ciddi durum, üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın ikamet ettiği Üye Devletin yetkili makamına bildirilmelidir.

UDI Temel UDI-DI: 081001460F0062E6

eIFU Dil Sürümleri

Kullanım Talimatlarını indirmek için lütfen <http://www.schuremed.com/schuremed-eifu> adresine gidin.

Sembol Sözlüğü

Sembol	Başlık	Sembol Açıklaması
	Üretici	Tıbbi cihaz üreticisini belirtir.
	Avrupa Topluluğu'ndaki Yetkili Temsilci	Avrupa topluluğundaki yetkili temsilciyi belirtir.
	Son Kullanma Tarihi	Tıbbi cihazın kullanılması gereken son tarihi belirtir.
	Parti Kodu	Parti veya grubun tanımlanabilmesi için üreticinin parti kodunu belirtir.
	Katalog veya Kalem Numarası	Tıbbi cihazın tanımlanabilmesi için üreticinin katalog veya kalem numarasını belirtir.
	Seri Numarası	Belirli bir tıbbi cihazın tanımlanabilmesi için üreticinin seri numarasını belirtir.
	Dikkat	Cihazı veya kontrolü sembolün yerleştirildiği yere yakın bir yerde çalıştırırken dikkatli olunması gerektiğini belirtmek veya istenmeyen sonuçlardan kaçınmak için mevcut durumun operatör farkındalığı veya operatör eylemi gerektirdiğini belirtir.
	Tıbbi Cihaz	Ürünün bir tıbbi cihaz olduğunu belirtir.
	Eşsiz Cihaz Tanımlayıcı	Eşsiz cihaz tanımlayıcı bilgisi içeren bir barkodu belirtir.
	CE İşareti	Avrupa Uygunluğu.
	Tek Hastada Kullanım	Ürünün tek bir hastada kullanılan bir cihaz olduğunu belirtir.



Üretici

SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 ABD

Ücretsiz (888) 724-8763 | Tel (781) 982-7000 | Fas (781) 982-7001 | orders@schuremed.com



Yetkili Temsilci

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, Hollanda