

Brugsanvisning

REF Table Width Extension, lille
800-0081 11"L x 8"W (28 cm x 20 cm)

REF Table Width Extension, lille (EU)
800-0081-EU 11"L x 8"W (28 cm x 20 cm)

Udskiftningspude

Table Width Extension Pad, lille
508-0132 11"L x 8"W (28 cm x 20 cm)

REF Table Width Extension, medium
800-0079 15"L x 8"W (38 cm x 20 cm)

REF Table Width Extension, medium (EU)
800-0079-EU 15"L x 8"W (38 cm x 20 cm)

Udskiftningspude



Table Width Extension Pad, medium
508-0114 15"L x 8"W (38 cm x 20 cm)

REF Table Width Extension, stor
800-0077 20"L x 4"W (51 cm x 10 cm)

REF Table Width Extension, stor (EU)
800-0077-EU 20"L x 4"W (51 cm x 10 cm)

Udskiftningspude

Table Width Extension Pad, stor
508-0075 20"L x 4"W (51 cm x 10 cm)

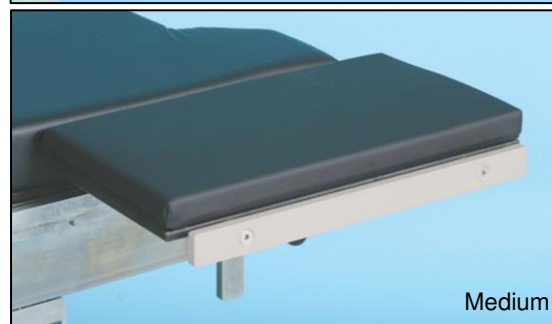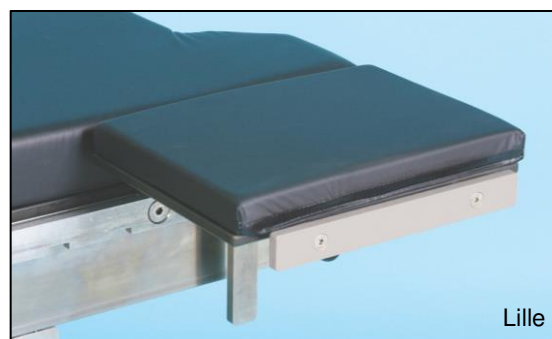

TILSIGTET ANVENDELSE

Tilsigtet anvendelse er at udvide bredden af kirurgisk bord. De tilsigtede brugere af denne enhed er medicinske fagfolk på hospitaler og kirurgiske centre.

INSTRUKTIONER

Bliv fortrolig med funktionerne i patientpositioneringsenheden inden brug sammen med patienten. Øv altid brugen hos en sygeplejerske, en læge eller en passende frivillig inden klinisk brug.

Vedhæftning til kirurgisk bord

1. Fastgør Simple Clamp P / N 800-0228 (sælges separat) på sideskinnen
2. Sæt monteringsstolpen i klemmen
3. Drej håndtaget med uret for at stramme klemmen

Adskillelse fra det kirurgiske bord

1. Drej klemhåndtaget mod uret for at løsne det
2. Fjern fra klemmen

GENERELLE SPECIFIKATIONER

Enhedsmaal (maksimum)

Lille	Medium	Stor
800-0081 & 800-0081-EU <ul style="list-style-type: none">• <i>Længde: 11" +/- 0,5"</i> (28 cm +/- 1 cm)• <i>Bredde: 8" +/- 0,5"</i> (20 cm +/- 1 cm)• <i>Dybde: 8" +/- 0,5" (med pude)</i> (20 cm +/- 1 cm)• <i>Enhedsvægt:</i> 4 lbs. +/- 0,5 lb (1,8 kg +/- 222 g)• <i>Installation af en person</i>	800-0079 & 800-0079-EU <ul style="list-style-type: none">• <i>Længde: 15" +/- 0,5"</i> (38 cm +/- 1 cm)• <i>Bredde: 8" +/- 0,5"</i> (20 cm +/- 1 cm)• <i>Dybde: 8" +/- 0,5" (med pude)</i> (20 cm +/- 1 cm)• <i>Enhedsvægt:</i> 4 lbs. +/- 0,5 lb (1,8 kg +/- 222 g)• <i>Installation af en person</i>	800-0077 & 800-0077-EU <ul style="list-style-type: none">• <i>Længde: 20" +/- 0,5"</i> (51 cm +/- 1 cm)• <i>Bredde: 4" +/- 0,5"</i> (10 cm +/- 1 cm)• <i>Dybde: 8" +/- 0,5" (med pude)</i> (20 cm +/- 1 cm)• <i>Enhedsvægt:</i> 4,5 lbs. +/- 0,5 lb (2 kg +/- 222 g)• <i>Installation af en person</i>

KOMPONENTOVERSIGT

Tabel bredde forlængere er kirurgiske bordforlængelser, der fastgøres til kirurgisk tabel sideskinner.

Udskiftningspuder

508-0132	Table Width Extension Pad, Lille	11"L x 8"W (28 cm x 20 cm)
508-0114	Table Width Extension Pad, Medium	15"L x 8"W (38 cm x 20 cm)
508-0075	Table Width Extension Pad, Stor	20"L x 4"W (51 cm x 10 cm)

Andet krævet produkt til brug:

800-0228 Simple Clamp (sælges separat)

US: 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0228

Denyer: 0,236" x 1,496" (6 mm x 38 mm) PN# 800-0228-DEN

Europa: 0,394" x 0,984" (10 mm x 25 mm) PN# 800-0228-EU

Eschmann (UK): 0,236" x 1,260" (6 mm x 32 mm) PN# 800-0228-UK

Japan: 0,354" x 1,260" (9 mm x 32 mm) PN# 800-0228-JPN

Schweizisk: 0,394" x 1,181" (10 mm x 30 mm) PN# 800-0228-SWISS

GENEREL INFORMATION

- Produkt ikke lavet med naturlig gummilatex
- Enhed understøtter 500 lb. (227 kg) proportional patientbelastning (6'4" (193 cm) patient pr. 99% menneskelig kropsmode)
- Produktgaranti dækker produkt fra fabrikationsfejl i en periode på 2 år
- Hvis beskadiget ved forsendelse, skal du ringe til kundeservice på (888) 724-8763 eller (781) 982-7000 for at få autorisationsnummer for returmateriale. Kontakt kundeservice for at få problemer med produktgaranti.
- CE-mærket medicinsk udstyr i henhold til MDR (EU) 2017/745
- Produktet er vedligeholdelsesfrit, kontroller produktets tilstand inden næste brug
- Apparatets levetid er 5 år ved normal brug
- Opbevar enheden mellem (-20°C og 30°C) mellem -4°F til +86°F

BORTSKAFFELSE

- **Generelt** - Forebygg infektion ved rengøring og desinficering af produktet inden bortskaffelse
- **Emballage** - Bortskaf emballagemateriale via husholdningsaffald i henhold til nationale krav
- SchureMed accepterer brugte eller pensionerede produkter - eller bortskaffes i overensstemmelse med nationale krav



ADVARSLER OM PRODUKTBRUG

ADVARSEL! Maksimal belastning bør ikke overstige passende andel af en patient, der vejer 500 lb. (227 kg). Vær forsigtig med kirurgiske tabeller med lav maksimal belastningskapacitet, for at skinner i tilbehør ikke er overbelastede.



ADVARSEL! Genbrug ikke enheden, hvis der er tydelige tegn på skade eller funktionelle problemer. Kontakt producenten før genbrug.



ADVARSEL!

Fare som følge af forkert brug. Følg brugsanvisningen nøje med dit kirurgiske bordsystem.

RENGØRINGSANBEFALING

Følg de nuværende Association of periOperative Registered Nurses Journal Guidelines for ordentlig rengørings- og desinfektionsprocedurer.



ADVARSEL!

Overhold standarder for blodbårne patogener fra Occupational Safety and Health Administration. Brug anbefalet beskyttelsestøj, handsker, masker og øjenbeskyttelse til at rengøre tilbehør.

FORSIGTIG

Læs / følg producentens anvisninger til rengøring af væsker nøje. Brug IKKE rengøringsmidler, der indeholder phenoler.

1. Fjern større forurenende stoffer fra tilbehør med engangsmaterialer. Følg passende procedurer for bortskaffelse af biofarligt affald.
2. Påfør rengøringsvæske på hele tilbehøret og tør det af med en ren, fnugfri klud, indtil al fugt og rengøringsvæske er fjernet fra tilbehøret.
3. Lad tilbehøret tørre

BRUGERBEMÆRKNING


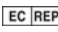



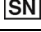





Enhver alvorlig hændelse, der har fundet sted i forbindelse med enheden, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og / eller patienten er etableret.

UDI Grundlæggende UDI-DI: 081005737F0003KK

eIFU Sprogversioner

For at downloade og udskrive brugsanvisningen skal du gå til <http://www.schuremed.com/schuremed-eifu>.

Symbolordliste

Symbol	Titel	Symbolbeskrivelse
	Producent	Angiver producenten af medicinsk udstyr.
	Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab	Angiver den autoriserede repræsentant i Det Europæiske Fællesskab.
	Sidste anvendelsesdato	Angiver den dato, hvorefter det medicinske udstyr ikke må bruges.
	Batchkode	Angiver producentens batchkode, så batchen eller partiet kan identificeres.
	Katalog- eller varenummer	Angiver producentens katalog- eller varenummer, så det medicinske udstyr kan identificeres.
	Serienummer	Angiver producentens serienummer, så et specifikt medicinsk udstyr kan identificeres.
	Forsigtig	For at indikere, at forsigtighed er nødvendig ved betjening af udstyret eller kontrollen tæt på, hvor symbolet er placeret, eller for at indikere, at den aktuelle situation kræver operatøropmærksomhed eller operatørhandling for at undgå uønskede konsekvenser.
	Medicinsk udstyr	Angiver, at varen er et medicinsk udstyr.
	Unikt enheds-id	Angiver en stregkode, som indeholder unikke enheds-id-oplysninger.
	CE-mærkning	Europæisk overensstemmelse.
	Må kun bruges til én enkelt patient	Angiver, at varen er et medicinsk udstyr til brug på én enkelt patient.



Producent

SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Gratis (888) 724-8763 | **Tlf.:** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | **orders@schuremed.com**



Autoriseret repræsentant

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP Haag, Holland