

Kullanım Talimatları

REF Table Width Extension, Küçük
800-0081 11"L x 8"W (28 cm x 20 cm)

REF Table Width Extension, Küçük (EU)
800-0081-EU 11"L x 8"W (28 cm x 20 cm)

Değiştirme Padi

Table Width Extension Pad, Küçük
508-0132 11"L x 8"W (28 cm x 20 cm)

REF Table Width Extension, Orta
800-0079 15"L x 8"W (38 cm x 20 cm)

REF Table Width Extension, Orta (EU)
800-0079-EU 15"L x 8"W (38 cm x 20 cm)

Değiştirme Padi




Table Width Extension Pad, Orta
508-0114 15"L x 8"W (38 cm x 20 cm)

REF Table Width Extension, Büyük
800-0077 20"L x 4"W (51 cm x 10 cm)

REF Table Width Extension, Büyük (EU)
800-0077-EU 20"L x 4"W (51 cm x 10 cm)

Değiştirme Padi

Table Width Extension Pad, Büyük
508-0075 20"L x 4"W (51 cm x 10 cm)

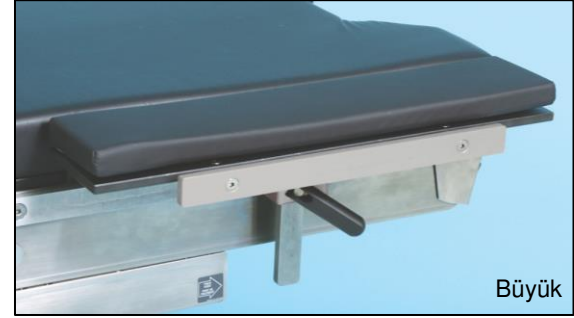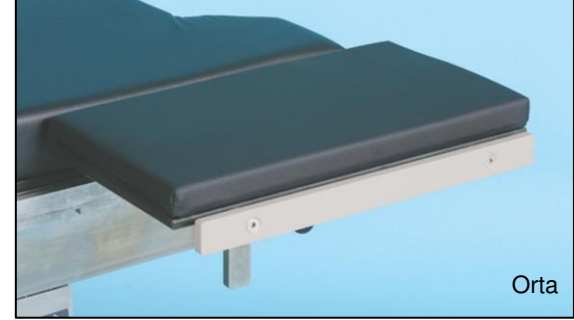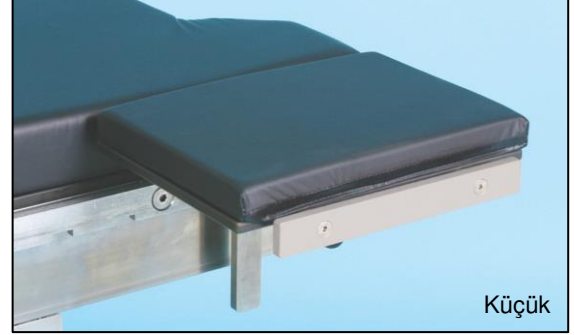

KULLANIM AMACI

Kullanım amacı ameliyat masasının genişliğini artırmaktır. Bu cihazın hedef kullanıcıları, hastanelerde ve ameliyat merkezlerinde çalışan tıp uzmanlarıdır.

TALİMATLAR

Hasta ile kullanımdan önce, hasta pozisyonlama cihazının özelliklerini öğrenin. Klinik olarak kullanımdan önce her zaman bir hemşire, doktor veya uygun gönüllü üzerinde uygulama gerçekleştirin.

Ameliyat Masasına Takma

1. Basit Kelepçe P/N 800-0228'i (ayrı satılır) yan ray üzerine takın
2. Montaj direğini kelepçeye yerleştirin
3. Kelepçeyi sıkmak için kolu saat yönünde çevirin

Ameliyat Masasından Çıkarma

1. Gevşetmek için kelepçe kolunu saat yönü tersine çevirin
2. Kelepçeyi çıkarın

GENEL TANIMLAMALAR

Cihaz Ebatları (maksimum)

Küçük	Orta	Büyük
800-0081 ve 800-0081-EU <ul style="list-style-type: none">Uzunluk: 11" +/- 0,5" (28 cm +/- 1 cm)Genişlik: 8" +/-0,5" (20 cm +/- 1 cm)Derinlik: 8" +/-0,5" (ped ile) (20 cm +/- 1 cm)Cihaz Ağırlığı: 4 lbs. +/- 0,5 lbs. (1,8 kg +/- ,22 kg)Tek kişilik kurulum	800-0079 ve 800-0079-EU <ul style="list-style-type: none">Uzunluk: 15" +/- 0,5" (38 cm +/- 1 cm)Genişlik: 8" +/- 0,5" (20 cm +/- 1 cm)Derinlik: 8" +/- 0,5" (ped ile) (20 cm +/- 1 cm)Cihaz Ağırlığı: 4 lbs. +/- 0,5 lbs. (1,8 kg +/- ,22 kg)Tek kişilik kurulum	800-0077 ve 800-0077-EU <ul style="list-style-type: none">Uzunluk: 20" +/- 0,5" (51 cm +/- 1 cm)Genişlik: 4" +/- 0,5" (10 cm +/- 1 cm)Derinlik: 8" +/- 0,5" (ped ile) (20 cm +/- 1 cm)Cihaz Ağırlığı: 4,5 lbs. +/- 0,5 lbs. (2 kg +/- ,22 kg)Tek kişilik kurulum

BİLEŞEN GENEL BAKIŞI

Masa Genişleticiler, ameliyat masası yan raylarına takılan ameliyat masa uzantılarıdır.

Değiştirme Pedleri

508-0132 Table Width Extension Pad, Küçük 11"L x 8"W (28 cm x 20 cm)

508-0114 Table Width Extension Pad, Orta 15"L x 8"W (38 cm x 20 cm)

508-0075 Table Width Extension Pad, Büyük 20"L x 4"W (51 cm x 10 cm)

Kullanım için diğer gerekli ürün:

800-0228 Basit Kelepçe (ayrı satılır)

US: 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0228

Denyer: 0,236" x 1,496" (6 mm x 38 mm) PN# 800-0228-DEN

Europe: 0,394" x 0,984" (10 mm x 25 mm) PN# 800-0228-EU

Eschmann (UK): 0,236" x 1,260" (6 mm x 32 mm) PN# 800-0228-UK

Japan: 0,354" x 1,260" (9 mm x 32 mm) PN# 800-0228-JPN

Swiss: 0,394" x 1,181" (10 mm x 30 mm) PN# 800-0228-SWISS

GENEL BİLGİLER

- Ürün, Doğal Kauçuk Lateksten üretilmemiştir
- Cihaz, 500 lb. (227 kg) orantılı hasta yükünü destekler (%99 insan vücudu modeli için 6'4" (193 cm) boyunda hasta)
- Ürün garantisi, 2 yıllık üretim hatalarından kaynaklanan ürünleri kapsar
- Nakliyede hasar görmesi durumunda, İade Materyal Yetkilendirme numarası almak için Müşteri Hizmetlerini (888) 724-8763 veya (781) 982-7000 numaralarından arayın. Ürün garanti sorunları için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- MDR (EU) 2017/745 uyarınca CE işaretli tıbbi cihaz
- Ürün bakım gerektirmez, bir sonraki kullanımdan önce ürün durumunu kontrol edin
- Cihaz ömrü normal kullanımda 5 yıldır
- Cihazı, -4°F ila +86°F (-20°C ila 30°C) arasında depolayın

BERTARAF ETME

- **Genel** - Bertaraf işleminden önce ürünü temizleyerek ve dezenfekte ederek enfeksiyonu önleyin
- **Ambalaj** - Ambalaj malzemesini ulusal gerekliliklere göre evsel atıklar ile bertaraf edin
- **SchureMed**, kullanılmış veya kullanımdan kaldırılmış ürünleri geri kabul eder veya ulusal gerekliliklere göre bertaraf eder



ÜRÜN KULLANIMI UYARILARI

UYARI! Maksimum yük, 500 lbs. (227 kg) ağırlığında olan bir hastanın uygun oranını aşmamalıdır. Aksesuar raylarının aşırı yüklenmediği düşük maksimum yük kapasiteli ameliyat masalarında dikkatle kullanın.



UYARI! Bariz hasar ibareleri veya işlevsel sorunlar varsa cihazı tekrar kullanmayın. Yeniden kullanmadan önce üreticiye danışın.



UYARI!

Hatalı kullanımdan kaynaklanan tehlikeler. Ameliyat masası sisteminizde Kullanım Talimatlarına kesin bir biçimde uyun.

TEMİZLİK ÖNERİLERİ

Uygun temizlik ve dezenfeksiyon prosedürleri için geçerli perioperatif Diplomalı Hemşireler Birliği Yönergelerini izleyin.



UYARI!

Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresinden kan yolu ile bulaşan patojenler için standartlara uyun. Aksesuarı temizlemek için önerilen koruyucu giysiler, eldivenler, maskeler ve göz korumalarını kullanın.

DİKKAT

Temizleme sıvıları için üreticinin talimatlarını tam anlamıyla okuyun/uygulayın. Fenolik içeren temizleyici KULLANMAYIN.

1. Aksesuardan büyük kirletici maddeleri tek kullanımlık malzemeler ile kaldırın. Uygun biyolojik atık bertaraf etme prosedürlerini izleyin.
2. Temizleme sıvısını tüm aksesuara bol miktarda uygulayın ve aksesuardan tüm nem ve temizleme sıvısı kaldırılana kadar temiz, tüy bırakmayan bir bez ile silin
3. Aksesuarı kurumaya bırakın

KULLANICI BİLDİRİMİ


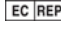









Cihazla ilgili olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay, üreticiye ve kullanıcının ve / veya hastanın yerleşik olduğu Üye Devletin yetkili otoritesine bildirilmelidir.

UDI Temel UDI-DI: 081005737F0003KK

eIFU Dil Sürümleri

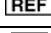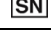Kullanım Talimatlarını indirmek için lütfen <http://www.schuremed.com/schuremed-eifu> adresine gidin.

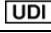Sembol Sözlüğü

Sembol	Başlık	Sembol Açıklaması
	Üretici	Tıbbi cihaz üreticisini belirtir.
	Avrupa Topluluğu'ndaki Yetkili Temsilci	Avrupa topluluğundaki yetkili temsilciyi belirtir.
	Son Kullanma Tarihi	Tıbbi cihazın kullanılması gereken son tarihi belirtir.
	Parti Kodu	Parti veya grubun tanımlanabilmesi için üreticinin parti kodunu belirtir.
	Katalog veya Kalem Numarası	Tıbbi cihazın tanımlanabilmesi için üreticinin katalog veya kalem numarasını belirtir.
	Seri Numarası	Belirli bir tıbbi cihazın tanımlanabilmesi için üreticinin seri numarasını belirtir.
	Dikkat	Cihazı veya kontrolü sembolün yerleştirildiği yere yakın bir yerde çalıştırırken dikkatli olunması gerektiğini belirtmek veya istenmeyen sonuçlardan kaçınmak için mevcut durumun operatör farkındalığı veya operatör eylemi gerektirdiğini belirtir.
	Tıbbi Cihaz	Ürünün bir tıbbi cihaz olduğunu belirtir.
	Eşsiz Cihaz Tanımlayıcı	Eşsiz cihaz tanımlayıcı bilgisi içeren bir barkodu belirtir.
	CE İşareti	Avrupa Uygunluğu.
	Tek Hastada Kullanım	Ürünün tek bir hastada kullanılan bir cihaz olduğunu belirtir.



Üretici

SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 ABD

Ücretsiz (888) 724-8763 | Tel (781) 982-7000 | Fas (781) 982-7001 | orders@schuremed.com



Yetkili Temsilci

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, Hollanda