

Gebruiksaanwijzing

REF Table Width Extension, klein
800-0081 11" L x 8" B (28 cm x 20 cm)

REF Table Width Extension, klein (EU)
800-0081-EU 11" L x 8" B (28 cm x 20 cm)

Vervangende Pad

Table Width Extension Pad, klein
508-0132 11" L x 8" B (28 cm x 20 cm)

REF Table Width Extension, middel
800-0079 15" L x 8" B (38 cm x 20 cm)

REF Table Width Extension, middel (EU)
800-0079-EU 15" L x 8" B (38 cm x 20 cm)

Vervangende Pad


Table Width Extension Pad, middel
508-0114 15" L x 8" B (38 cm x 20 cm)

REF Table Width Extension, groot
800-0077 20" L x 4" B (51 cm x 10 cm)


REF Table Width Extension, groot (EU)
800-0077-EU 20" L x 4" B (51 cm x 10 cm)

Vervangende Pad

Table Width Extension Pad, groot
508-0075 20" L x 4" B (51 cm x 10 cm)

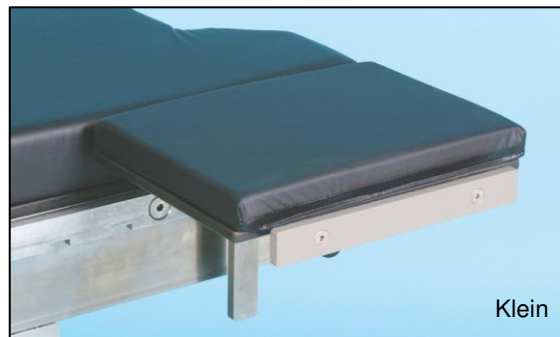

Klein

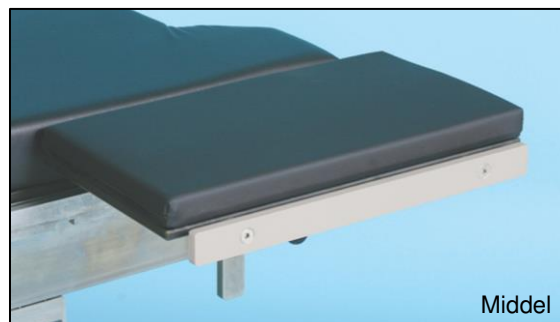

Middel



Groot

BEOOGD GEBRUIK

Het beoogde gebruik is het verbreden van de operatietafel. De beoogd gebruikers van dit product zijn medische beroepsbeoefenaars in ziekenhuizen en chirurgische klinieken.

INSTRUCTIES

Zorg dat u bekend bent met de kenmerken van het positioneringsapparaat voor patiënten voordat u het bij een patiënt gebruikt. Oefen altijd eerst op een verpleegkundige, arts of geschikte vrijwilliger voorafgaand aan klinisch gebruik.

Bevestigen aan de operatietafel

1. Bevestig de eenvoudige klem onderdeelnr. 800-0228 (apart verkrijgbaar) op de zijrail
2. Steek de montagepaal in de klem
3. Draai de handgreep rechtsom om de klem vast te draaien.

Losmaken van de operatietafel

1. Draai de handgreep van de klem linksom om het los te maken
2. Uit de klem verwijderen

ALGEMENE SPECIFICATIES

Afmetingen hulpmiddel (maximaal)

Klein	Middel	Groot
800-0081 en 800-0081-EU • <i>Lengte: 11" +/- 0,5"</i> (28 cm +/- 1 cm) • <i>Breedte: 8" +/- 0,5"</i> (20 cm +/- 1 cm) • <i>Diepte: 8" +/- 0,5" (met kussen)</i> (20 cm +/- 1 cm) • <i>Gewicht hulpmiddel:</i> 4 lbs. +/- 0,5 lbs. (1,8 kg +/- 0,22 kg) • <i>Installatie door één persoon</i>	800-0079 en 800-0079-EU • <i>Lengte: 15" +/- 0,5"</i> (38 cm +/- 1 cm) • <i>Breedte: 8" +/- 0,5"</i> (20 cm +/- 1 cm) • <i>Diepte: 8" +/- 0,5" (met kussen)</i> (20 cm +/- 1 cm) • <i>Gewicht hulpmiddel:</i> 4 lbs. +/- 0,5 lbs. (1,8 kg +/- 0,22 kg) • <i>Installatie door één persoon</i>	800-0077 en 800-0077-EU • <i>Lengte: 20" +/- 0,5"</i> (51 cm +/- 1 cm) • <i>Breedte: 4" +/- 0,5"</i> (10 cm +/- 1 cm) • <i>Diepte: 8" +/- 0,5" (met kussen)</i> (20 cm +/- 1 cm) • <i>Gewicht hulpmiddel:</i> 4,5 lbs. +/- 0,5 lbs. (2 kg +/- 0,22 kg) • <i>Installatie door één persoon</i>

OVERZICHT VAN ONDERDELEN

Tafelbreedtevergroeters zijn verbreders voor de operatietafel die aan de zijrails van de operatietafel worden bevestigd.

Vervangende Pads

508-0132	Table Width Extension Pad, klein	11" L x 8" B (28 cm x 20 cm)
508-0114	Table Width Extension Pad, middel	15" L x 8" B (38 cm x 20 cm)
508-0075	Table Width Extension Pad, groot	20" L x 4" B (51 cm x 10 cm)

Andere vereiste producten voor gebruik:

800-0228 Eenvoudige klem (apart verkrijgbaar)

VS: 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) onderdeelnr. 800-0228

Denyer: 0,236" x 1,496" (6 mm x 38 mm) onderdeelnr. 800-0228-DEN

Europa: 0,394" x 0,984" (10 mm x 25 mm) onderdeelnr. 800-0228-EU

Eschmann (VK): 0,236" x 1,260" (6 mm x 32 mm) onderdeelnr. 800-0228-UK

Japan: 0,354" x 1,260" (9 mm x 32 mm) onderdeelnr. 800-0228-JPN

Zwitserland: 0,394" x 1,181" (10 mm x 30 mm) onderdeelnr. 800-0228-SWISS

ALGEMENE INFORMATIE

- Het product is niet vervaardigd met natuurrubberlatex.
- Het hulpmiddel ondersteunt een proportionele patiëntbelasting van 500 lbs. (227 kg) (6'4" (193 cm) lange patiënt per 99% menselijk lichaamsmodel).
- De productgarantie dekt fabricagefouten van het product gedurende een periode van 2 jaar.
- Als er schade is ontstaan tijdens de verzending, bel dan de klantenservice op (888) 724-8763 of (781) 982-7000 voor het verkrijgen van een RMA-nummer (Return Material Authorization; retourzendingsautorisatie). Neem contact op met de klantenservice bij problemen met de productgarantie.
- Medisch hulpmiddel met CE-markering overeenkomstig de MDR (EU) 2017/745
- Het product is onderhoudsvrij. Controleer de staat van het product voorafgaand aan het volgende gebruik.
- Onder normale omstandigheden is de levensduur van het apparaat 5 jaar.

- Sla het apparaat op tussen -4 °F tot +86 °F (-20 °C tot 30 °C).

AFVOER

- **Algemeen** - Voorkom infecties door het product te reinigen en te desinfecteren voordat het wordt afgevoerd.
- **Verpakking** - Voer het verpakkingsmateriaal af via het huishoudelijk afval in overeenstemming met de nationale voorschriften.
- SchureMed accepteert gebruikte of verouderde producten terug - of voer het product af in overeenstemming met de nationale voorschriften.



WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING TOT PRODUCTGEBRUIK

WAARSCHUWING! De maximale belasting mag de toepasselijke verhouding van een patiënt met een gewicht van 500 lbs. (227 kg) niet overschrijden. Zorg ervoor dat de accessoirerails bij operatietafels met een laag maximaal draagvermogen niet overbelast worden.



WAARSCHUWING! Dit hulpmiddel mag niet hergebruikt worden als er duidelijke tekenen zijn van beschadiging of functionele problemen. Neem contact op met de fabrikant voor het product opnieuw gebruikt wordt.



WAARSCHUWING!

Bij onjuist gebruik ontstaat gevaar. Volg de Gebruiksaanwijzing bij uw operatietafelsysteem nauwkeurig op.

AANBEVOLEN REINIGING

Volg de huidige richtlijnen van het Association of periOperative Registered Nurses Journal (Vereniging van peri-operatieve geregistreerde verpleegkundigen) voor de juiste reinigings- en desinfectieprocedures.



WAARSCHUWING!

Houd u zich aan de OSHA-normen (Occupational Safety and Health Administration) voor door bloed overgedragen pathogenen. Maak bij het reinigen van accessoires gebruik van de aanbevolen beschermende kleding, handschoenen, maskers en oogbescherming.

LET OP

Lees de aanwijzingen van de fabrikant voor het reinigen van vloeistoffen nauwkeurig en volg deze nauwkeurig op. Gebruik GEEN reinigingsmiddelen die fenolen bevatten.

1. Verwijder grove verontreinigingen uit accessoires met behulp van wegwerpmaterialen. Volg de toepasselijke procedures met betrekking tot de afvoer van biologisch gevaarlijk afval.
2. Breng royaal reinigingsvloeistof aan op het gehele accessoire en veeg het af met een schone, pluisvrije doek totdat het accessoire vrij is van al het vocht en de reinigingsvloeistof.
3. Laat het accessoire drogen.

KENNISGEVING VOOR DE GEBRUIKER

Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot het hulpmiddel, moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker en / of patiënt is gevestigd.

eIFU Taalversies

Download en print de Gebruiksaanwijzingen via www.schuremed.com

Symbolenlijst

Symbol	Titel
	Fabrikant
	Datum van vervaardiging
	Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
	Geautoriseerde vertegenwoordiger in Zwitserland
	Importeur
	Serienummer
	Waarschuwing
	Medisch apparaat
	Unieke apparaat-ID
	CE-markering



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Gratis +1-888-724-8763 | **T** +1-781-982-7000 | **Fax** +1-781-982-7001 | **orders@schuremed.com**

