

Käyttöohjeet

REF Table Width Extension, pieni
800-0081 11"L x 8"W (28 cm x 20 cm)

REF Table Width Extension, pieni (EU)
800-0081-EU 11"L x 8"W (28 cm x 20 cm)

Korvaava tyyny

Table Width Extension Pad, pieni
508-0132 11"L x 8"W (28 cm x 20 cm)

REF Table Width Extension, keskikoko
800-0079 15"L x 8"W (38 cm x 20 cm)

REF Table Width Extension, keskikoko (EU)
800-0079-EU 15"L x 8"W (38 cm x 20 cm)

Korvaava tyyny


Table Width Extension Pad, keskikoko
508-0114 15"L x 8"W (38 cm x 20 cm)

REF Table Width Extension, suuri
800-0077 20"L x 4"W (51 cm x 10 cm)


REF Table Width Extension, suuri (EU)
800-0077-EU 20"L x 4"W (51 cm x 10 cm)

Korvaava tyyny

Table Width Extension Pad, suuri
508-0075 20"L x 4"W (51 cm x 10 cm)

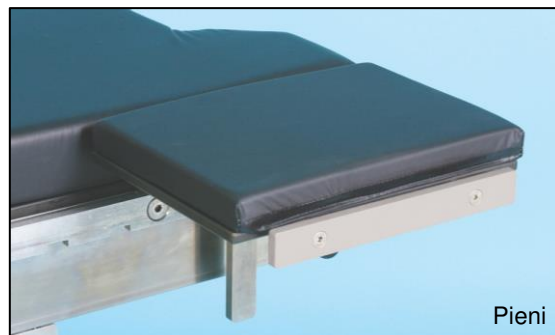

Pieni

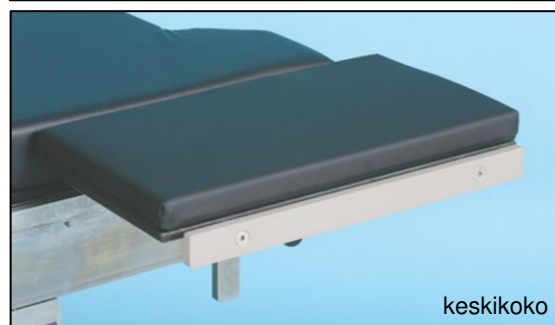

keskikoko



Suuri

KÄYTTÖTARKOITUS

Käyttötarkoitus on leventää leikkauspöytää. Laite on tarkoitettu lääketieteen ammattilaisten käyttöön sairaaloissa ja leikkausklinikoilla.

OHJEET

Perehdy potilaan asennoittimien ominaisuuksiin ennen potilaskäyttöä. Harjoittele aina sairaanhoitajan, lääkärin tai vapaaehtoisen kanssa ennen kliinistä käyttöä.

Kiinnittäminen leikkauspöytään

1. Kiinnitä Schure-lukko XL P/N 800-0228 (myydään erikseen) sivukiskoon
2. Aseta kiinnityspylväs lukkoon
3. Kiristä lukko kääntämällä kahvaa myötäpäivään

Irrottaminen leikkauspöydästä

1. Löysää lukko kääntämällä kahvaa vastapäivään
2. Irrota lukosta

YLEISET MÄÄRITELMÄT

Laitteen mitat (enintään)

Pieni	Keskikoko	Suuri
800-0081 ja 800-0081-EU • Pituus: 11" +/- 0,5" (28 cm +/- 1 cm) • Leveys: 8" +/- 0,5" (20 cm +/- 1 cm) • Syvyys: 8" +/- 0,5" (pehmusteen kanssa) (20 cm +/- 1 cm) • Laitteen paino: 4 lbs. +/- 0,5 lb (1,8 kg +/- ,22 kg) • Yhden henkilön asennettavissa	800-0079 ja 800-0079-EU • Pituus: 15" +/- 0,5" (38 cm +/- 1 cm) • Leveys: 8" +/- 0,5" (20 cm +/- 1 cm) • Syvyys: 8" +/- 0,5" (pehmusteen kanssa) (20 cm +/- 1 cm) • Laitteen paino: 4 lbs. +/- 0,5 lb (1,8 kg +/- ,22 kg) • Yhden henkilön asennettavissa	800-0077 ja 800-0077-EU • Pituus: 20" +/- 0,5" (51 cm +/- 1 cm) • Leveys: 4" +/- 0,5" (10 cm +/- 1 cm) • Syvyys: 8" +/- 0,5" (pehmusteen kanssa) (20 cm +/- 1 cm) • Laitteen paino: 4,5 lbs. +/- 0,22 kg (2 kg +/- ,22 kg) • Yhden henkilön asennettavissa

OSIEN YLEISKATSAUS

Pöydän leventäjät ovat leikkauspöydän jatkeita, jotka kiinnitetään pöydän sivukiskoihin.

Vaihtotyyny

508-0132	Table Width Extension Pad, pieni	11"L x 8"W (28 cm x 20 cm)
508-0114	Table Width Extension Pad, keskikoko	15"L x 8"W (38 cm x 20 cm)
508-0075	Table Width Extension Pad, suuri	20"L x 4"W (51 cm x 10 cm)

Muut käyttöön tarvittavat tuotteet:

800-0228 Yleislukko (myydään erikseen)

US: 0,374 x 1,122 tuumaa (9,5 x 28,5 mm) PN# 800-0228

Denyer: 0,236 x 1,496 tuumaa (6 x 38 mm) PN# 800-0228-DEN

Eurooppa: 0,394 x 0,984 tuumaa (10 x 25 mm) PN# 800-0228-EU

Eschmann (UK): 0,236 x 1,260 tuumaa (6 x 32 mm) PN# 800-0228-UK

Japani: 0,354 x 1,260 tuumaa (9 x 32 mm) PN# 800-0228-JPN

Sveitsi: 0,394 x 1,181 tuumaa (10 x 30 mm) PN# 800-0228-SWISS

YLEISET TIEDOT

- Tuote, jonka valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilateksia
- Laite kestää 227 kg:n (500 lb) suhteellisen potilaskuorman 193 cm (6'4") pitkällä potilaalla 99 %:n ihmiskehomallia kohti)
- Tuotteen takuu kattaa tuotteen valmistusvirheet 2 vuoden ajan
- Jos laite on vaurioitunut kuljetuksessa, ota yhteyttä asiakaspalveluun numeroon (888) 724-8763 tai (781) 982-7000 saadaksesi palautuksen valtuutusnumeron. Jos asiasi koskee tuotteen takuuta, ota yhteys asiakaspalveluun.
- CE-merkitty lääkinällinen laite MDR (EU) 2017/745:n mukaisesti
- Tuote ei tarvitse huoltoa. Tarkista tuotteen kunto ennen seuraavaa käyttöä
- Laitteen käyttöikä on 5 vuotta normaalissa käytössä
- Säilytä laitetta -20–30 °C (-4–86 °F) lämpötilassa

HÄVITTÄMINEN

- **Yleistä** – estä infektio puhdistamalla ja desinfioimalla tuote ennen hävittämistä
- **Pakkaus** – hävitä pakkausmateriaali kotitalousjätteen mukana ohjeiden mukaisesti kansalliset vaatimukset huomioiden
- **SchureMed** hyväksyy takaisin käytetyt tai käytöstä poistetut tuotteet tai hävittää tuotteet kansallisten vaatimusten mukaisesti



TUOTTEEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROITUKSET

VAROITUS! Enimmäiskuormitus ei saa ylittää 227 kg:n painoisen potilaan suhteellista osuutta (500 lb). Ole varovainen, kun käytät matalasti kuormitettavia leikkauspöytiä, etteivät lisäkiskot ylikuormitu.



VAROITUS! Älä käytä laitetta uudelleen, jos siinä on selkeä vaurio tai toimintahäiriö. Käänny valmistajan puoleen, ennen kuin käytät laitetta uudelleen.



VAROITUS!

Virheellisestä käytöstä aiheutuva vaara. Noudata tarkasti leikkauspöytäjärjestelmän käyttöohjeita.

PUHDISTUSSUOSITUS

Noudata Association of periOperative Registered Nurses Journalin tai paikallisesti hyväksyttyjä puhdistus- ja desinfiointimenetelmiä.



VAROITUS!

Noudata työturvallisuus- ja työterveyshallinnon verivälitteisiä patogeenejä koskevia standardeja. Käytä lisävarusteiden puhdistamiseen suositeltuja suojavaatteita, -käsineitä, -kasvosuojaimia ja suojalaseja.

VAROITUS

Lue huolellisesti pesuaineen valmistajan ohjeet, ja toimi niiden mukaisesti. ÄLÄ käytä pesusaineita, jotka sisältävät fenoliaineita.

1. Poista suuret epäpuhtaudet lisävarusteista, joissa on kertakäyttöisiä materiaaleja. Noudata asianmukaisia biovaarallisten jätteiden käsittelymenetelmiä.
2. Levitä pesunestettä runsaasti koko lisävarusteen pinnalle ja pyyhi puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla, kunnes kaikki kosteus ja pesuneste on poistettu lisävarusteesta
3. Anna lisävarusteen kuivua

KÄYTTÄJÄN ILMOITUS

Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista tapahtumista on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä ja / tai potilas on sijoittautunut.

eIFU-kieliversiot

Lataa ja tulosta käyttöohje osoitteesta www.schuremed.com

Symboliluettelo

Symboli	Nimi
	Valmistaja
	Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä
	Viimeinen käyttöpäivä
	Tuotantoerän koodi
	Luettelo- tai tuotenumero
	Sarjanumero
	Huomio
	Lääkinnällinen laite
	Yksikäsitteinen laitetunniste (Unique Device Identifier, UDI)
	CE-merkintä
	Yhdelle potilaalle



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Maksuton nro (888) 724-8763 | **Puh.** (781) 982-7000 | **Faksi** (781) 982-7001 | **orders@schuremed.com**

