

Bruksanvisning

REF Table Width Extension, liten
800-0081 11"L x 8"W (28 cm x 20 cm)

REF Table Width Extension, liten (EU)
800-0081-EU 11"L x 8"W (28 cm x 20 cm)

Ersättningskudde

Table Width Extension Pad, liten
508-0132 11"L x 8"W (28 cm x 20 cm)

REF Table Width Extension, medium
800-0079 15"L x 8"W (38 cm x 20 cm)

REF Table Width Extension, medium (EU)
800-0079-EU 15"L x 8"W (38 cm x 20 cm)

Ersättningskudde


Table Width Extension Pad, medium
508-0114 15"L x 8"W (38 cm x 20 cm)

REF Table Width Extension, stor
800-0077 20"L x 4"W (51 cm x 10 cm)


REF Table Width Extension, stor (EU)
800-0077-EU 20"L x 4"W (51 cm x 10 cm)

Ersättningskudde

Table Width Extension Pad, stor
508-0075 20"L x 4"W (51 cm x 10 cm)

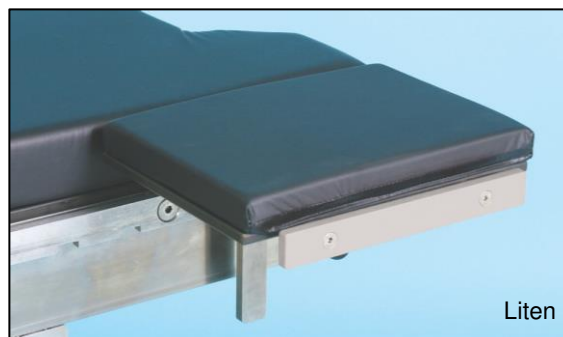

Liten

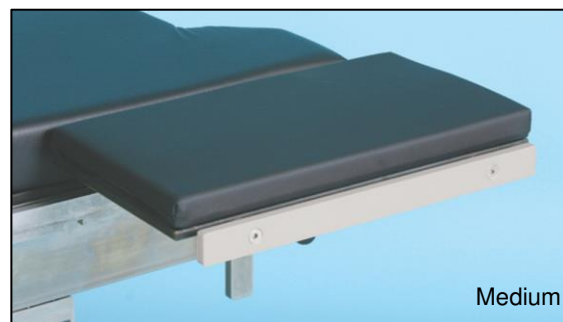

Medium



Stor

AVSEDD ANVÄNDNING

Den är avsedd att användas för att förlänga operationsbordets bredd. De avsedda användarna av denna enhet är medicinsk personal inom sjukhus och kirurgiska center.

INSTRUKTIONER

Bekanta dig med funktionerna i patientpositioneringsenheten innan du använder den med en patient. Öva alltid i förväg på en sköterska, läkare eller annan frivillig innan kliniskt bruk.

Fastsättning på operationsbordet

1. Sätt fast Simple Clamps P/N 800-0228 (säljs separat) på sidostängerna.
2. Sätt in monteringsstolpen i klämman
3. Vrid handtaget medurs för att dra åt klämmorna

Avskiljning från operationsbordet

1. Vrid klämhandtaget moturs för att lossa
2. Ta bort från klämman

ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

Enhetens dimensioner (max)

Liten	Medium	Stor
800-0081 & 800-0081-EU • Längd: 11" +/- 0,5" (28 cm +/- 1 cm) • Bredd: 8" +/- 0,5" (20 cm +/- 1 cm) • Djup: 8" +/- 0,5" (med dyna) (20 cm +/- 1 cm) • Enhetens vikt: 4 lbs. +/- 0,5 lbs. (1,8 kg +/- 0,22 kg) • Monteras av en person	800-0079 & 800-0079-EU • Längd: 15" +/- 0,5" (38 cm +/- 1 cm) • Bredd: 8" +/- 0,5" (20 cm +/- 1 cm) • Djup: 8" +/- 0,5" (med dyna) (20 cm +/- 1 cm) • Enhetens vikt: 4 lbs. +/- 0,5 lbs. (1,8 kg +/- 0,22 kg) • Monteras av en person	800-0077 & 800-0077-EU • Längd: 20" +/- 0,5" (51 cm +/- 1 cm) • Bredd: 4" +/- 0,5" (10 cm +/- 1 cm) • Djup: 8" +/- 0,5" (med dyna) (20 cm +/- 1 cm) • Enhetens vikt: 4,5 lbs. +/- 0,5 lbs. (2 kg +/- 0,22 kg) • Monteras av en person

KOMPONENTÖVERSIKT

Bordsbreddsförlängare är förlängningar för operationsbord som fästsoperationsbords sidskenor.

Ersättningsdynor

508-0132	Table Width Extension Pad, Liten	11"L x 8"W (28 cm x 20 cm)
508-0114	Table Width Extension Pad, Medium	15"L x 8"W (38 cm x 20 cm)
508-0075	Table Width Extension Pad, Stor	20"L x 4"W (51 cm x 10 cm)

Annan produkt som krävs för användning:

800-0228 Enkel klämma (säljs separat)

US: 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0228

Denyer: 0,236" x 1,496" (6 mm x 38 mm) PN# 800-0228-DEN

Europe: 0,394" x 0,984" (10 mm x 25 mm) PN# 800-0228-EU

Eschmann (UK): 0,236" x 1,260" (6 mm x 32 mm) PN# 800-0228-UK

Japan: 0,354" x 1,260" (9 mm x 32 mm) PN# 800-0228-JPN

Swiss: 0,394" x 1,181" (10 mm x 30 mm) PN# 800-0228-SWISS

ALLMÄN INFORMATION

- Produkten innehåller inte naturgummilatex
- Enheten har stöd för 500 lb. (227 kg) proportionell patientbelastning (6'4" (193 cm) lång patient per 99 % mänsklig kroppsmodell)
- Produktgarantin täcker produkten från tillverkningsfel under en period av 2 år
- Om skada uppstår vid frakt, kontakta kundtjänst på (888) 724-8763 eller (781) 982-7000 för att erhålla ett RMA-nummer (Return Material Authorization). Kontakta kundtjänst vid ärenden avseende produktgaranti.
- CE-märkt medicinsk enhet enligt MDR (EU) 2017/745
- Produkten är underhållsfri, kontrollera produktens skick innan nästa användning

- *Enhetens livslängd är 5 år vid normal användning*
- *Förvara enheten mellan -4°F till +86°F (-20°C till 30°C)*

BORTSKAFFANDE

- **Allmänt** - Förhindra smitta genom att rengöra och desinficera produkten före bortskaffande
- **Förpackning** - Bortskaffa förpackningsmaterialet via hushållsavfall i enlighet med nationella krav
- *SchureMed tar emot begagnade eller utgallrade varor och gör sig av med dem i enlighet med nationella bestämmelser.*



VARNINGAR FÖR PRODUKTANVÄNDNING

***WARNING!** Den maximala belastningen bör inte överstiga en lämplig andel av en patient som väger 500 lbs. (227 kg). Var försiktig med operationsbord med låg maximal belastningskapacitet så att tillbehörsskenorna inte överbelastas.*



***WARNING!** Återanvänd inte enheten vid tydliga tecken på skada eller funktionsproblem. Kontakta tillverkaren före återanvändning.*



WARNING!

Fara vid felaktig användning. Följ noggrant bruksanvisningarna för ditt operationsbordssystem.

RENGÖRINGSREKOMMENDATIONER

För korrekta rengörings- och desinfektionsförfaranden, följ de aktuella riktlinjerna i Associeringen av perioperativa registrerade sjuksköterskor Riktlinjer för journalen.



WARNING!

Följ standarderna för blodburna patogener från Arbetssäkerhets- och hälsoskyddsförvaltningen (Occupational Safety and Health Administration). Använd rekommenderade skyddskläder, handskar, masker och ögonskydd för att rengöra tillbehöret.

FÖRSIKTIGHET

Läs/följ noggrant tillverkarens anvisningar för rengöringsvätskor. Använd INTE rengöringsmedel som innehåller fenoler.

1. *Avlägsna större föroreningar från tillbehöret med engångsmaterial. Följ lämpliga rutiner för bortskaffande av biologiskt farligt avfall.*
2. *Applicera rengöringsvätska generöst på hela tillbehöret och torka av med en ren, luddfri trasa tills all fukt och rengöringsvätska har avlägsnats från tillbehöret.*
3. *Låt tillbehöret torka*

ANVÄNDARANMÄRKNING

Alla allvarliga händelser som har inträffat i samband med enheten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och / eller patienten är etablerad.

eIFU språkversioner

För att ladda ner och skriva ut användarinstruktionerna, gå till www.schuremed.com

Symbolförklaring

Symbol	Titel
	Tillverkare
	Tillverkningsdatum
	Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
	Auktoriserad representant i Schweiz
	Importör
	Serienummer
	Varning
	Medicinsk utrustning
	Unik enhetsidentifierare
	CE-märkning



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Avgiftsfritt (888) 724-8763 | **Tel** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | **orders@schuremed.com**

