

Mode d'emploi

REF Pieds Schure , Lexan 800-0011

Coussinets de rechange

Coussinets jetables SchureFoot 508-0111

UTILISATION PRÉVUE

Le SchureFoot , Lexan est spécialement conçu pour tirer parti du genou, permettant l'accès au compartiment médial de la jambe opérée pendant les procédures arthroscopiques. Les utilisateurs prévus de ce dispositif sont les professionnels de la santé au sein des hôpitaux et des centres de chirurgie.

INSTRUCTIONS

Familiarisez-vous avec les caractéristiques du dispositif de positionnement du patient avant de l'utiliser sur un patient. Entraînez-vous toujours à l'utiliser sur une infirmière, un médecin ou un volontaire approprié avant de l'utiliser en clinique.



Configuration et utilisation de SchureFoot

Fixez la douille au rail latéral de la table chirurgicale près de l'extrémité de la section du torse, sur le côté du genou opératoire

Faites glisser le coussinet jetable n° 508-0111 (vendu séparément) sur le tube SchureFoot

Insérez le poteau de montage SchureFoot dans la douille

Une fois le patient sur la table chirurgicale, faites glisser le SchureFoot le long du rail pour obtenir la position souhaitée pour la jambe

Tournez la poignée de la douille dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le SchureFoot dans la position souhaitée.

Préparez et drapiez selon la méthode habituelle

la procédure terminée, jetez le coussinet jetable SchureFoot . Vaporisez SchureFoot avec un désinfectant approuvé par l'hôpital et essuyez-le.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Dimensions de l'appareil (maximum)

- *Longueur : 12" +/- 0,5" (31 cm +/- 1 cm)*
- *Hauteur : 16" +/- 0,5" (41 cm +/- 1 cm)*
- *Diamètre : 2" +/- 0,5" (5 cm +/- 1 cm) (avec tampon 2 3/4" (7 cm))*
- *Poids de l'appareil : 2 +/- 0,5 lb (0,9 +/- 0,22 kg)*
- *Fonctionne sur la partie des jambes de la table chirurgicale*
- *Nécessite une prise pour se fixer à la table chirurgicale*

APERÇU DES COMPOSANTS

SchureFoot , Lexan est utilisé dans une variété d'interventions chirurgicales, y compris, mais sans s'y limiter, la chirurgie arthroscopique.

Coussinets de remplacement
508-0111 Schurefoot Blocs d' alimentation

Autres produits requis pour l'utilisation : 800-0134 Schure Socket XL

US : 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0134

Denyer : 0,236" x 1,496" (6 mm x 38 mm) PN# 800-0134-DEN

Europe : 0,394" x 0,984" (10 mm x 25 mm) PN# 800-0134-EU

Eschmann (UK) : 0,236" x 1,260" (6 mm x 32 mm) PN# 800-0134-UK

Japon : 0,354" x 1,260" (9 mm x 32 mm) PN# 800-0134-JPN

Suisse : 0,394" x 1,181 po (10 mm x 30 mm) N° de pièce 800-0134-SWISS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- *Produit non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel*
- *La garantie du produit couvre le produit contre les défauts de fabrication pendant une période de 2 ans*
- *En cas de dommage pendant le transport, appelez le service client au (888) 724-8763 ou au (781) 982-7000 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel. Pour les problèmes de garantie du produit, contactez le service client.*
- *Le produit ne nécessite aucun entretien, vérifiez l'état du produit avant la prochaine utilisation*
- *La durée de vie de l'appareil est de 5 ans en utilisation normale*
- *Conserver l'appareil entre -4°F et +86°F (-20°C et 30°C)*

ÉLIMINATION

- **Généralités** - *Prévenir l'infection en nettoyant et en désinfectant le produit avant de l'éliminer*
- **Emballage** - *Éliminer le matériel d'emballage avec les ordures ménagères conformément aux exigences nationales*
- *SchureMed accepte les produits usagés ou retirés du marché - ou élimine les produits conformément aux exigences nationales*



AVERTISSEMENT !

Risque résultant d'une utilisation incorrecte. Suivez strictement les instructions de votre système de table d'opération.



AVERTISSEMENT! *Ne pas réutiliser l'appareil s'il présente des signes évidents de dommages ou de problèmes de fonctionnement. Consulter le fabricant avant de le réutiliser .*

RECOMMANDATION DE NETTOYAGE

Suivez les directives actuelles de l'Association of periOperative Registered Nurses Journal pour connaître les procédures de nettoyage et de désinfection appropriées.



AVERTISSEMENT !

Respectez les normes relatives aux agents pathogènes transmissibles par le sang de l'Occupational

Safety and Health Administration. Utilisez les vêtements de protection, les gants, les masques et les lunettes de protection recommandés pour nettoyer l'accessoire .

ATTENTION

Lisez et suivez strictement les instructions du fabricant concernant les liquides de nettoyage. N'utilisez PAS de nettoyeurs contenant des composés phénoliques.

1. *Éliminez les principaux contaminants de l'accessoire à l'aide de matériaux jetables. Suivez les procédures appropriées d'élimination des déchets biologiques dangereux.*
2. *Appliquez généreusement du liquide de nettoyage sur l'ensemble de l'accessoire et essuyez avec un chiffon propre et non pelucheux jusqu'à ce que toute l'humidité et le liquide de nettoyage soient éliminés de l'accessoire.*
3. *Laissez sécher l'accessoire*



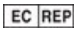







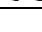
AVIS À L'UTILISATEUR

Tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Versions linguistiques de l'eIFU

Pour télécharger et imprimer le mode d'emploi, rendez-vous sur <https://www.schuremed.com>, sélectionnez le produit et cliquez sur le menu déroulant pour accéder aux traductions actuellement disponibles du mode d'emploi.

Glossaire des symboles

Symbole	Titre
	Fabriquant
	Date de fabrication
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Représentant autorisé en Suisse
	Importateur
	Numéro de catalogue
	Numéro de série
	Avertissement
	Dispositif médical
	Identifiant unique de l'appareil
	Marquage CE



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 États-Unis

Numéro gratuit (888) 724-8763 | Tél. (781) 982-7000 | Télécopieur (781) 982-7001 | commandes@schuremed.com